

極東バイタルメディア

標準寒天培地

本培地は、乳及び乳製品、食品中の一般生菌数測定、その他魚肉練り製品の原料中の芽胞菌数測定に使用できます。



Escherichia coli

35°C, 24 時間, 好気培養

培地組成 (1,000 mL 当たり)

| | | | |
|-------|-------|----|-----------------|
| ペプトン | 5.0 g | 寒天 | 15.0 g |
| 酵母エキス | 2.5 g | | pH 7.1±0.2 |
| ブドウ糖 | 1.0 g | | ※典型的な組成を示しています。 |


製品コード

100 枚包装 (統一商品コード No. 551-05700-3)

有効期間

6 ヶ月

発育像

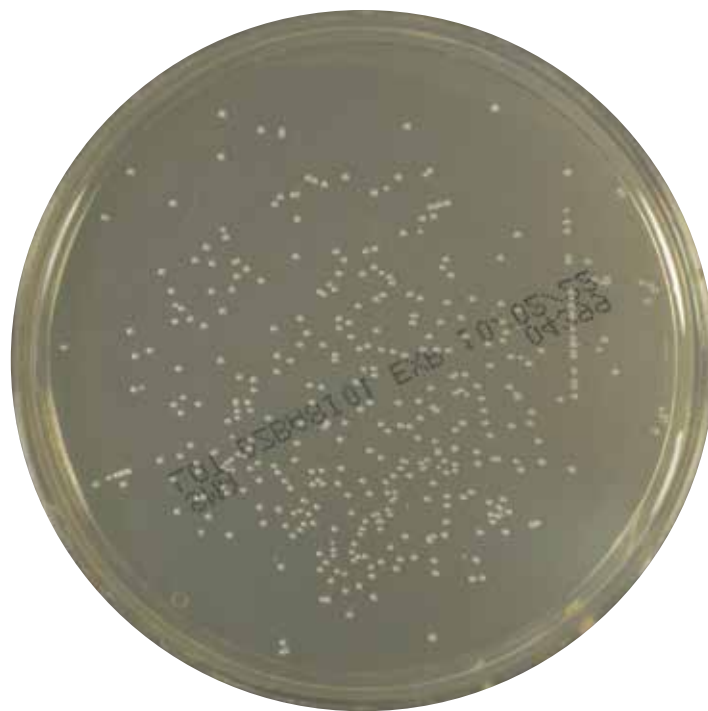

Enterococcus faecalis

35°C, 24 時間, 好気培養

使用上および取扱い上の注意 ※以下の注意をよく読んでからご使用ください

- 微生物の取扱いに習熟した人の指導の下に、バイオハザード対策を実施した上で使用してください。
- シャーレの破損が認められるものは使用しないでください。
- 有効期限切れの製品は使用しないでください。
- 培地の保存は必ず冷暗所（2～10°C）で、凍結ならびに乾燥しないようにしてください。
- 冷蔵庫からの頻回な出し入れは性能の劣化を招きますので、極力お避けください。
- 本培地を使用する場合は、室温に戻してからご使用ください。
- 使用済みの培地は 121°C、30 分以上高压蒸気滅菌を行い、速やかに廃棄してください。
- 廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

お問い合わせ先

 極東製薬工業株式会社

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 7-8
 TEL : 03-5645-5664 FAX : 03-5645-5703
<https://www.kyokutoseiyaku.co.jp/>